

# DPC2000

## Deepwell plate centrifuge

- ✓ 고장 없고 조용한 brushless DC motor
- ✓ 작동시 수평으로 유지되는 스윙 로터
- ✓ LCD display: 시간 및 속도 표시
- ✓ 3가지 모드 (간단 스핀, 시간 세팅, 연속 사용)
- ✓ 사용 중 덮개 열림 방지 기능
- ✓ 비상 도어 열림 스위치
- ✓ Auto balancing



### 사용 가능 plate

Deep-well plate

96 well PCR plate

384 well plate

ELISA plate




Model	DPC2000
Maximum rcf	500×g
Rotor capacity	4×96-well plates / 2×deep-well plates
Speed	from 500r/min to 2000r/min
Timer	15s~99min /continuous operation
Motor type	Brushless motor
Power supply	AC100V-240V, 50-60Hz
Dimension	370×330×175mm
Weight	10.5kg



### 덮개 보호용 지지대

덮개를 여닫을 때 파손 방지를 위한 섬세한 디자인

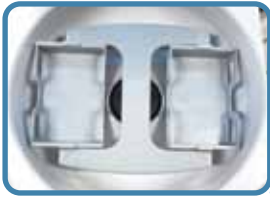

### 스윙로터

고정식 앵글로터와 달리 샘플의 손상을 최소화 하기 위한 디자인 적용



### 도어 오픈센서

안전을 위해 실험 중 열림 방지 기능 및 오픈시 자동 정지 기능 내장



### LCD 액정 및 디지털 버튼

선명한 LCD 스크린 방식으로 쉽고 편리한 조작을 위한 심플한 디지털 터치 디자인



### 미끄럼 방지 고무 패드 및 비상 열림 스위치

흔들림 및 미끄럼 방지를 위한 하단 고무패드와 비상시 수동으로 오픈 가능한 별도 제어 장치 장착

